

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ – Trucheck

POŽADAVKY NA VZORKY

Odběry provádět pouze ve dnech pondělí–čtvrtek!

Zkumavka	Typ vzorku	Kontejner na vzorky	Objem
T1	Plná krev	 EDTA zkumavka (T1)	10 ml
T2	Plná krev	 EDTA zkumavka (T2)	10 ml
T3	Plná krev	 EDTA zkumavka (T3)	10 ml


PŘEDODBĚROVÉ POŽADAVKY

- Odběr krve musí proběhnout po 6hodinovém lačnění. Příjem tekutin je povolen.
- Žádanka o test (TRF) musí být vyplněna a podepsána lékařem, přečtena a podepsána pacientem. Dále pacient přečte a podepíše souhlas o ochraně osobních údajů. Uveďte prosím místo, datum a podpis na všech relevantních místech. Odběr 30 ml vzorku krve do tří vakuových zkumavek.

PROCES ODBĚRU KRVE DO VAKUOVÝCH ZKUMAVEK

- Provedte venepunkci pomocí vakuové jehly nebo motýlkového systému připojeného k držáku (BD Vacutainer systém).
- Připojte vakuovou zkumavku a odeberte 10 ml krve do EDTA zkumavky T1. Odpojte zkumavku z adaptéru a ihned ji jemně promíchejte 8 až 10 obráceními.
- Nechte motýlkovou jehlu na místě, připojte EDTA zkumavky (T2 a T3) a odeberte 10 ml krve do každé z nich. Každou zkumavku také jemně promíchejte 8 až 10 obráceními.
- Všechny zkumavky musí být naplněny během stejné odběrové procedury.

5. Nedostatečné nebo opožděné promíchání může vést k nepřesným výsledkům testu. Jedno obrácení vzorku znamená otočení zkumavky o 180 stupňů jedním směrem a poté zpět o 180 stupňů opačným směrem.

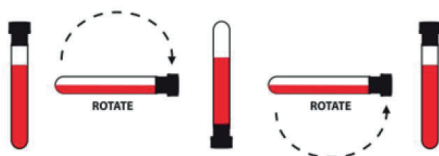

OZNAČOVÁNÍ A POŘADÍ ODBĚRU

Zkumavka	Typ zkumavky	Označení	Objem	Teplota skladování
T1	EDTA zkumavka	Jméno pacienta, datum narození, pohlaví, datum a čas odběru	10 ml	+2 °C až +6 °C
T2	EDTA zkumavka	Jméno pacienta, datum narození, pohlaví, datum a čas odběru	10 ml	+2 °C až +6 °C
T3	EDTA zkumavka	Jméno pacienta, datum narození, pohlaví, datum a čas odběru	10 ml	+2 °C až +6 °C

PODMÍNKY ODESLÁNÍ

- Pro aktivaci chladicího boxu stiskněte tlačítko na jeho spodní straně.
- NEODSTŘEĎUJTE krevní vzorky odebrané do EDTA zkumavek.
- Vzorky musí být vráceny do DCG v den odběru.
- Odesílejte vzorky plné krve při teplotě +2 °C až +6 °C.
- Požádejte o přepravní materiály alespoň 48 hodin před odběrem krve.
- Všechny zkumavky musí být správně označeny jménem pacienta, datem narození, pohlavím, datem a časem odběru.
- Nepoužívejte zkumavky po datu expirace.
- Uchovávejte dokumentaci v suchu a odděleně od vzorků.
- Kontakt pro přepravní dokumenty a dotazy ohledně odběru krve:
info@datar-lab.cz
Telefon: +420 513 035 442